


DiaSpect Tm

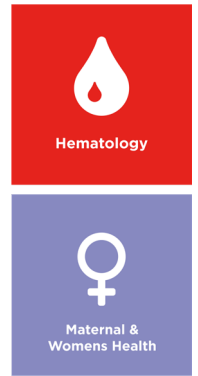

DiaSpect Tm

Sofortige Hämoglobin-Ergebnisse
aus einem tragbaren Analysegerät

- ◆ Ergebnisse in nur ca. 1 Sekunde
- ◆ Reagenzfreie Mikroküvetten
- ◆ 40 Tage oder 10.000 Tests bei Dauerbetrieb
- ◆ 2½ Jahre Haltbarkeit der Mikroküvetten

Schnell, einfach zu bedienen und zuverlässig unter allen Klimabedingungen

<p>Schnell und genau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse in nur ca. 1 Sekunde • Messbereich: 0 - 25,5 g/dL • Präzision (in der Serie): VK < 1% • Werksseitig kalibriert gegen HiCN-Referenzmethode gemäß ICSH • Photometrische Breitspektrum-Methode mit Trübungs- und Streulichtkompensation • Keine weitere Kalibrierung erforderlich
<p>Einfache Anwendung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 'Always on'-Technologie. Das Analysegerät ist immer einsatzbereit • Automatischer Selbsttest nach jeder Messung • Lange Haltbarkeit der Mikroküvette: 2,5 Jahre ab Herstellungsdatum • Mikroküvetten werden nicht von Luftfeuchtigkeit oder Temperatur beeinflusst. Sie können nach dem Öffnen des Beutels bis zum Haltbarkeitsdatum verwendet werden
<p>Praktisch und handlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Probenvolumen: <10 µl • Kapillares, venöses oder arterielles Blut (EDTA- und Heparin-Antikoagulans können verwendet werden) • Wartungsfrei • Umgebungstemperatur für den Betrieb: 10 °C bis 42 °C • Lagertemperatur: 0 °C bis 50 °C (- 30 °C bis 70 °C für max. 24 Stunden.) • Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (40 Tage / 10.000 Tests bei Dauerbetrieb) • Kompakt: 150 (T) x 90 (B) x 40mm (H) • Leicht: 180 g • Anschluss an PC über USB 2.0 oder Bluetooth (optional)



1

Blutprobe nehmen



2

Gefüllte Küvette einsetzen und sanft nach unten drücken



3

Ergebnisse in nur ca. 1 Sekunde

Vertrieb:

Hersteller
 DiaSpect Medical GmbH
 Von-Cancrin-Str. 1
 63877 Sailauf
 Germany

+49 (0) 39203 511 0
 info@ekf-diagnostic.de
 www.ekfdiagnostics.com

EKF | Diagnostics
 for life